

Xtra Fixierfilm


Optimiert die Fixierung des Melkverbandes

- Ein Muss**
- wenn sie mit einem Melkroboter arbeiten
 - wenn das Tier auf der Weide steht


Sie benötigen mindestens 2, in der Regel 3 Fixierfilme für eine sichere zusätzliche Fixierung.

- Beginnen sie vom unteren Ende des an der Zitze angelegten Melkverbandes.
- Der erste Fixierfilm muss zumindest den unteren Rand des Melkverbandes vollständig abdecken (idealerweise 50% Überstand).
- Achten Sie darauf, dass jeder weitere Fixierfilm mit dem Vorhergehenden etwa 50% überlappt.
- Der letzte Fixierfilm muss zumindest den oberen Rand des Melkverbandes abdecken (idealerweise 50% Überstand).

Fixierfilm:
rundherum geschützt, selbstaftend, kaum sichtbar, hochflexibel

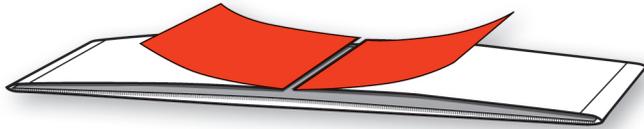


- 1** roter Anfasser
- 2** Produktschutz
- 3** Fixierfilm

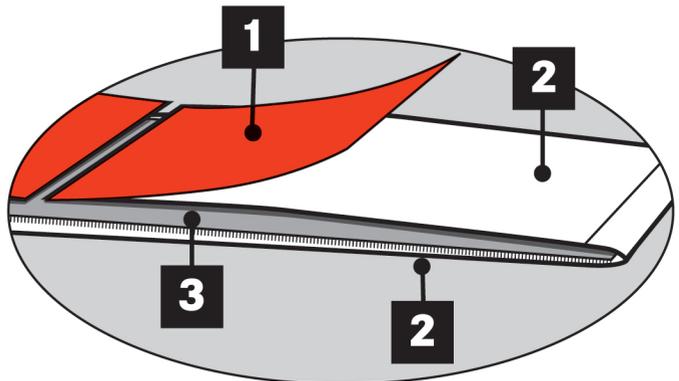

Stückzahl: 8 Stk. 30 Stk.


Anlegen des Fixierfilms

Darstellungsvariante 1

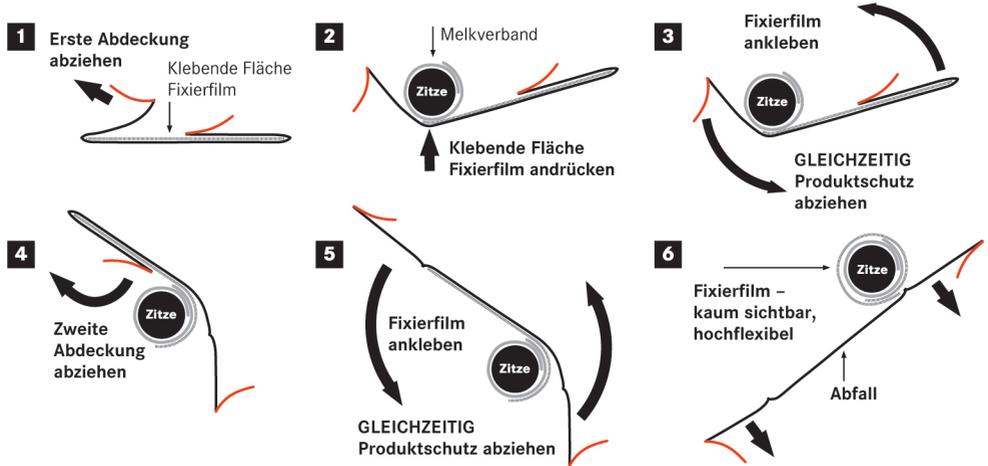

Darstellungsvariante 2

Anlegen des ersten Fixierfilms über den Melkverband.

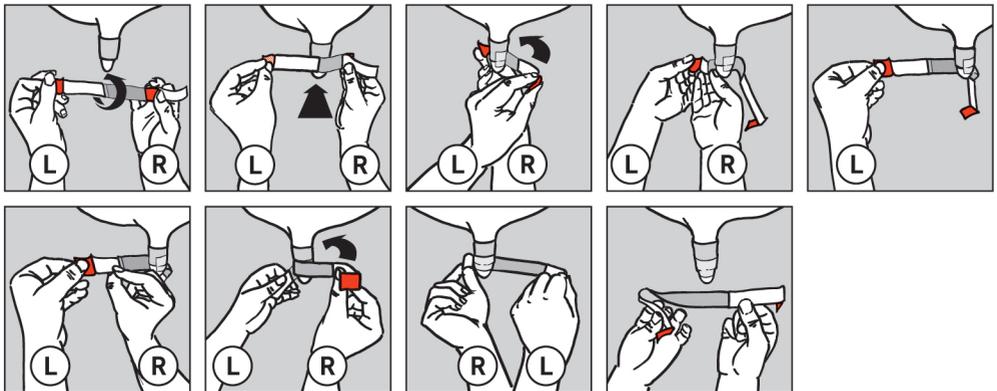

Bei zweitem und drittem Fixierfilm analog vorgehen.